

Mirage Quattro™

全罩式面罩

第四代技術

適用範圍廣泛： ResMed研發的第四代全罩式面罩適合95%以上的使用者。*

Mirage™ 雙層護墊含彈性空氣技術： 獨特的護墊適合睡眠時的移動，而且也為下顎下垂提供了有效的解決辦法。

MicroFit微調器： 新的前額支撐調節裝置提供個人化的配制與舒適。

輕巧、安靜且易於使用： 這些優點乃利用流線型的面罩設計、經改良的通氣孔設計與各式各樣方便使用者的特色。

MicroFit微調器

讓95%以上的使用者*覺得配戴更合適、密封效果更好且更舒適

一次設定頭帶插槽

保留最理想的配戴設定

已改良的內置通氣孔

提供最低噪音量

在鼻樑部位移動護墊膜

適合不同類型的鼻子構造，同時可防止洩漏進入眼內

有調整片的護墊扣鉤

易於從框架上摘下的護墊

含彈性空氣技術的Mirage雙層護墊

在最需密封處提升密封效果

在下巴部位移動護墊膜


保持面罩的密封效果，同時方便下顎的下垂與移動

一次設定頭帶插槽

易於摘下的面罩

簡式彎頭有預防窒息閥門(AAV)

彎頭配件易於組合與拆卸，假如流入面罩的氣流受到阻礙，AAV可提升安全性

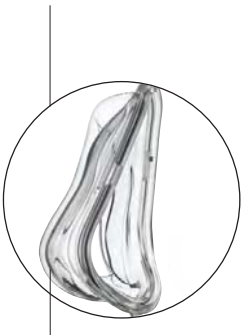

面罩護墊側視圖膜





技術特色

MicroFit微調器

24個調整位置供您隨意選擇 — 95%以上的使用者覺得配戴起來更舒適、有效*

- **可調整：**可於配戴在使用者臉上時加以調整
- **精確調整：**微調器的每個刻度以微小的增幅調整前額支撐裝置
- **漸進調整：**朝臉部移進，面罩配戴在臉上最舒適的時候讓使用者可感覺到
- **護墊與之同時調整：**隨著調整器調整面罩接觸臉部的角度，護墊也同時會調整，提高最需要密封部位的密封度 — 無需過度繃緊頭帶

使用者好處

個人化舒適

- MicroFit微調器可調整面罩適合使用者的臉型
- 含彈性空氣技術的雙層護墊可適應臉部輪廓，並且適應睡眠時的移動（包括下顎下垂）

輕巧並安靜

- 流線型設計讓面部感覺輕巧
- 經改良的通氣孔設計減輕噪音

便於使用

- MicroFit微調器和彈性空氣護墊技術有助於達到良好的面罩合適效果 — 第一次就合適，每次都合適
- 配件較少，易於處理、清潔、組合與拆卸

專業優點

合適範圍增加到95%以上的使用者*

- MicroFit微調器和彈性空氣護墊技術可調整面罩適合更多的臉部結構

- 新特小號面罩尺寸

顧客滿意與承諾

- 內附旅行包、面罩保養DVD、快速裝配指南與使用者指南的全面使用者支援配套
- 透過第一次配戴，提高治療適應性
- 配戴、舒適與密封適應個人的情況增進長期適應性
- 快速且容易組合與拆卸的簡化配件

費用與時效

- 細目減少：產品代號比Ultra Mirage™全罩式面罩少了33%，而且較少的面罩配件
- 減少了配戴與適應時間：經改良的護墊技術密封速度快
- 減少呼叫醫護人員的次數：易於使用與配戴

產品代號

Mirage Quattro全罩式面罩

歐洲1¹

特小	61204
小	61205
中	61206
大	61207

歐洲2²

特小	61208
小	61209
中	61210
大	61211

歐洲3³

特小	61228
小	61229
中	61230
大	61231

法國

特小	61220
小	61221
中	61222
大	61223

美國

特小	61224
小	61225
中	61226
大	61227

亞太地區

特小	61216
小	61217
中	61218
大	61219

澳紐地區

特小	61212
小	61213
中	61214
大	61215

1 英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、葡萄牙文和荷蘭文

2 英文、瑞典文、挪威文、丹麥文、芬蘭文、匈牙利文、波蘭文和希臘文

3 英文、俄文、土耳其文、捷克文、愛沙尼亞文、斯洛維尼亞文、斯洛伐克文、保加利亞文、羅馬尼亞文、拉脫維亞文和立陶宛文

* 資料來源：ResMed公司內部人體測量學資料